



# Cosmopor<sup>®</sup> Advance

## Opatrunek samoprzylepny do zaopatrywania pooperacyjnych sączących ran z wykorzystaniem technologii Dry Barrier<sup>®</sup>

### Charakterystyka:

- Technologia DryBarrier<sup>®</sup> nie pozwala na powstanie środowiska przyjaznego bakteriom - wysięk i wilgoć z rany odprowadzane są jednokierunkowo do warstwy chłonnej; bardzo wysokie zdolności absorpcyjne nie pozwalają na ich wydostanie się na zewnątrz cofanie do pozostałych warstw opatrunku; trzy warstwy opatrunku zapewniają optymalne gojenie rany.
- Nie ogranicza naturalnych funkcji skóry (przepuszcza parę wodną i powietrze).
- Zaokrąglone rogi zapobiegają zwiżaniu się opatrunku, nawet przy długotrwałym pozostawianiu na ranie.
- Odznacza się bardzo wysoką chłonnością - rana pozostaje sucha.

Dzięki polietylenowej siateczce stanowiącej warstwę kontaktową opatrunek nie przylega do rany - usunięcie opatrunku jest bezbolesne.

- Gruba warstwa chłonna stanowi dobrą ochronę mechaniczną rany przed czynnikami zewnętrznymi.
- Produkt ani jego opakowanie nie zawierają lateksu.

### Zastosowanie:

- Do leczenia ran pooperacyjnych oraz sterylnego opatrywania drobnych urazów, np. w ramach pierwszej pomocy. Szczególnie polecany do ran charakteryzujących się wysokim poziomem wysięku.

\*W wersji Antibacterial - pomiędzy warstwami występuje cienka warstewka zawierająca Ag

**PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.**  
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice  
Bezpłatna infolinia: 0 800 26 96 36 (8.00 - 16.00)  
**Odwiedź nasz sklep internetowy:**  
[www.hartmann24.pl](http://www.hartmann24.pl)



**DryBarrier<sup>®</sup>**  
Technology

### ③ Warstwa chłonna -

wchłonięcie płynu z warstwy 2 i jego zatrzymanie - z zewnątrz ta warstwa pozostaje sucha - zatrzymuje wszystkie nieczystości z rany

### ② Warstwa rozprowadzająca -


odprowadzenie płynu do warstwy chłonnej

### ① Warstwa kontaktowa -

siateczka polietylenowa - nie przykleja się do rany

Rana

Cosmopor DryBarrier<sup>®</sup> Technology  
Sposób działania

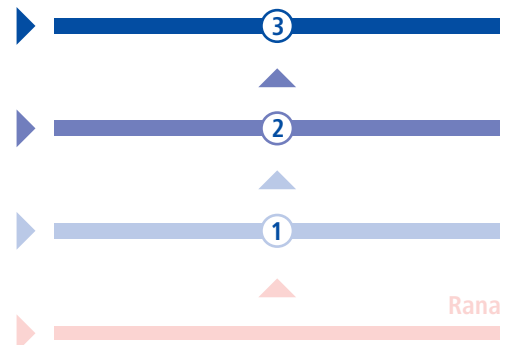

| Nazwa artykułu   | Numer artykułu | Rozmiar       | Jednostka miary | Opakowanie zbiorcze |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Cosmopor Advance | 901010         | 7,2 cm x 5 cm | 25 szt.         | 20                  |
|                  | 901011         | 10 cm x 6 cm  | 25 szt.         | 24                  |
|                  | 901012         | 15 cm x 6 cm  | 25 szt.         | 18                  |
|                  | 901013         | 10 cm x 8 cm  | 25 szt.         | 18                  |
|                  | 901014         | 15 cm x 8 cm  | 25 szt.         | 12                  |
|                  | 901015         | 20 cm x 10 cm | 25 szt.         | 10                  |