



NOWOŚĆ!

HydroTac[®]

Coś więcej niż pianka.



Odpowiednio osusza rany sączące.

HydroTac[®] - prosty w użyciu, higieniczny, skuteczny.

Sączące rany potrzebują pielęgnacji...


Aby umożliwić przewlekłym ranom gojenie, należy przede wszystkim usunąć włóknik i resztki martwych tkanek. Niestety komplikacje w procesie gojenia się rany mogą nastąpić również po fazie oczyszczania, dlatego także wtedy niezbędna jest szczególna pielęgnacja rany. Nagromadzenie wysięku może zakłócać ziarninowanie i sprzyjać powstaniu zakażenia rany. Dlatego nadmierny wysięk musi zostać usunięty. Jednakże nie wszystkie opatrunki o bardzo dużej chłonności są w tej fazie najlepszym wyborem. Mogą one spowodować wysuszenie rany, nie zapewniając jej, odpowiedniego w tej fazie gojenia, wilgotnego środowiska, czego skutkiem może być długotrwałe, kosztowne leczenie. Dlatego też na tym etapie gojenia wymagane jest zastosowanie opatrunków o odpowiedniej chłonności, jednocześnie stwarzających w ranie wilgotne środowisko, wspierające jej gojenie.



...i opatrunków HydroTac.


**Dobra początkowa przylepność
sprzyja łatwemu nałożeniu!**

Hydroaktywny opatrunek HydroTac jest kombinacją opatrunku piankowego z hydrożelem. Opatrunek spełnia wymagania zarówno ran o dużym wysięku jak i suchych. Znajdująca się od strony rany siatka hydrożelu, dzięki technologii AquaClear, uwalnia wilgoć do rany, także suchej, utrzymując w niej wilgotne środowisko. Siatczkowa struktura sprawia, że nadmiar wysięku z rany jest szybko i skutecznie wchłaniany do znajdującej się pod nią warstwy pianki poliuretanowej. Ma ona dużą pojemność chłonną i bezpiecznie zamyka w swojej strukturze nadmiar wydzieliny rany. Zewnętrzna, wodoodporna warstwa folii poliuretanowej chroni ranę przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych i jednocześnie nie utrudnia przepływu powietrza i pary wodnej. Siatka hydrożelu zapobiega przyklejaniu się opatrunku do rany oraz daje opatrunkowi, bardzo pomocny przy nakładaniu, efekt początkowej przylepności „Initial Tack”. Zakładanie oraz zmiana opatrunku są bardzo proste i bezbolesne.

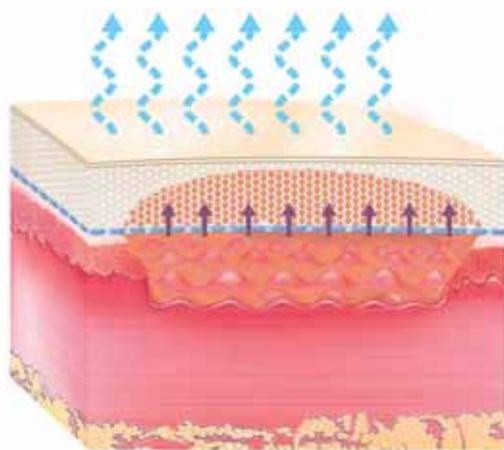

Wysoka chłonność


Wysokochłonny opatrunek piankowy szybko wchłania nadmiar wysięku i bezpiecznie zamyka go w swoich strukturach.

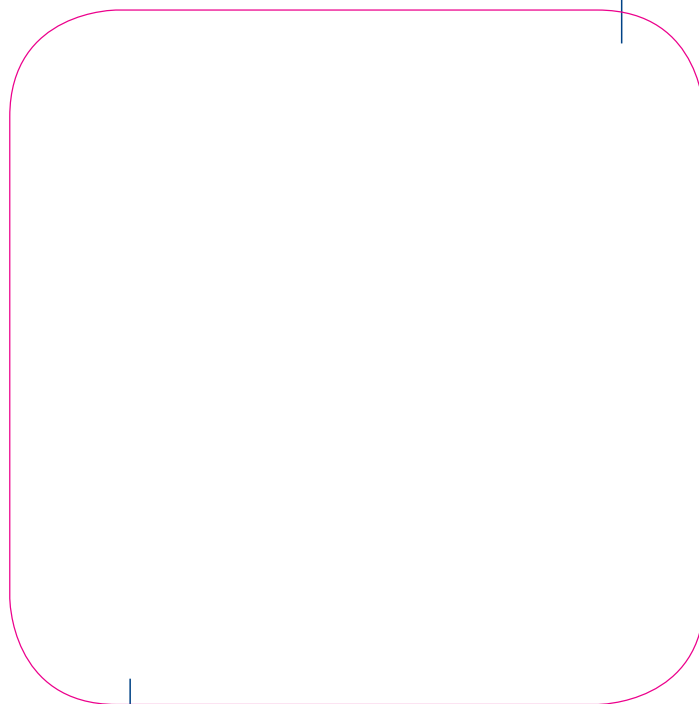

Zakładanie opatrunku

Opatrunek HydroTac można w prosty i higieniczny sposób nałożyć na ranę. Dzięki początkowej przylepności „Initial Tack” opatrunek pozostaje na swoim miejscu.

HydroTac

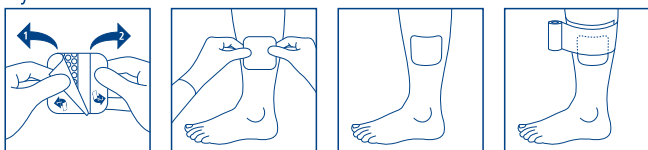


HydroTac comfort



Bezpieczeństwo

Od strony zewnętrznej opatrunek pokryty jest oddychającą, wodoodporną i nieprzepuszczalną dla bakterii folią poliuretanową, co zapewnia pacjentowi i użytkownikowi ochronę i bezpieczeństwo. Dodatkowo, folia poliuretanowa zapewnia zmienną przepuszczalność pary wodnej, dzięki czemu zdolność opatrunku do wchłaniania wysięku jest dostosowywana do stanu rany.

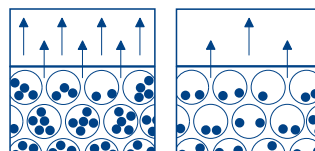

W przypadku większego wchłaniania wysięku uwalniana jest większa ilość pary wodnej.


W przypadku mniejszego wchłaniania wysięku uwalniana jest mniejsza ilość pary wodnej.

Odpowiednio nawilża rany suche.

HydroTac[®] - bezbolesny, indywidualnie dostosowany, hydroaktywny.

Suche rany potrzebują czasu...

Komórki w obszarze rany muszą mieć zapewnioną odpowiednią wilgotność, aby procesy ziarninowania i epitelializacji przebiegały w optymalnych warunkach. Suche rany ograniczają efektywność komórek. To z kolei może powodować, że proces gojenia rany będzie przebiegał wolniej lub zostanie zakłócony. Aby temu zapobiec i zapewnić oraz utrzymać wilgotne środowisko rany, wymagany jest opatrunek hydroaktywny.

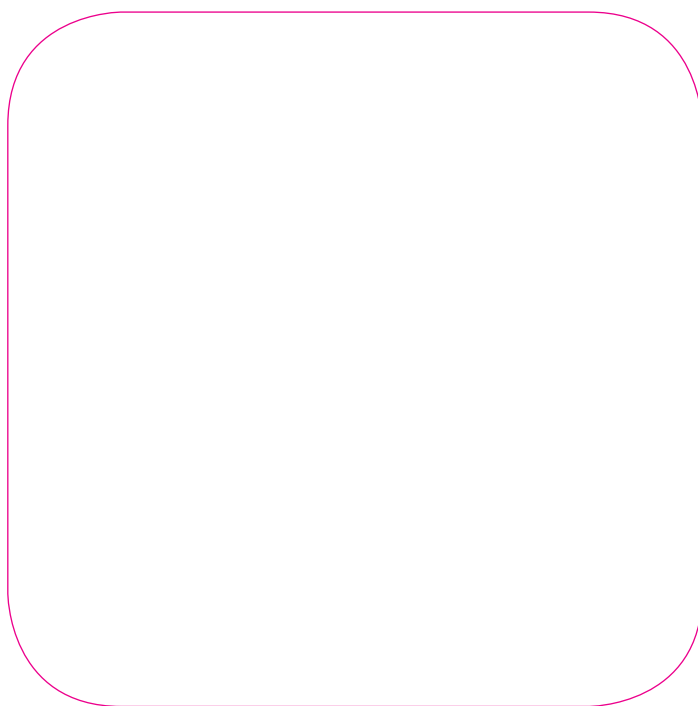

**Technologia AquaClear
firmy HARTMANN**

...i opatrunków HydroTac.

Opatrunek HydroTac nawilża stosunkowo suche rany dzięki innowacyjnej technologii AquaClear. Żel znajdujący się po stronie przylegającej do rany uwalnia do rany wilgoć według potrzeb. W ten sposób hydroaktywny opatrunek skutecznie zapobiega wysychaniu rany. Wilgotna warstwa hydrożelowa zapobiega przyklejaniu się opatrunku do rany, co pozwala na bezbolesną zmianę opatrunku. Dlatego opatrunki HydroTac są odpowiednie dla pacjentów wrażliwych na ból.

Uwalnianie wilgoci do rany

Dzięki technologii AquaClear firmy HARTMANN hydroaktywny żel uwalnia wilgoć do suchej rany. W ten sposób, na tym etapie gojenia, wytwarzane i utrzymywane jest wilgotne środowisko rany.



Bezbolesne usuwanie opatrunku

Dzięki warstwie hydrożelowej opatrunek nie przykleja się do rany. Minimalizuje to ból przy usuwaniu opatrunku HydroTac.



Wybór rodzaju opatrunku


Oprócz opatrunków HydroTac dostępne są również opatrunki HydroTac comfort wyposażone dodatkowo w folię samoprzylepną. Cienka warstwa folii ułatwia mocowanie opatrunku na skórze i zapewnia jego wysoki komfort noszenia.

Utrzymuje środowisko rany w równowadze.

HydroTac[®] - skuteczne i łagodne gojenie ran.

Korzyści związane ze skutecznym gojeniem ran przy zastosowaniu opatrunków HydroTac.

HydroTac to właściwy wybór dla skutecznego gojenia ran. Nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z raną relatywnie suchą, czy sączącą, nowy hydroaktywny opatrunek firmy HARTMANN spełnia indywidualne potrzeby rany i zapewnia jej wilgotne środowisko. Dlatego opatrunki HydroTac zapobiegają zastosowaniu niewłaściwego opatrunku po oczyszczeniu rany. Chłonna pianka szybko usuwa nadmiar wysięku, natomiast hydrożel odpowiednio nawilża suche rany. Technologia AquaClear umożliwia stworzenie i utrzymanie wilgotnego środowiska rany. Ponadto brzegi rany są chronione, co zapobiega ich maceracji.

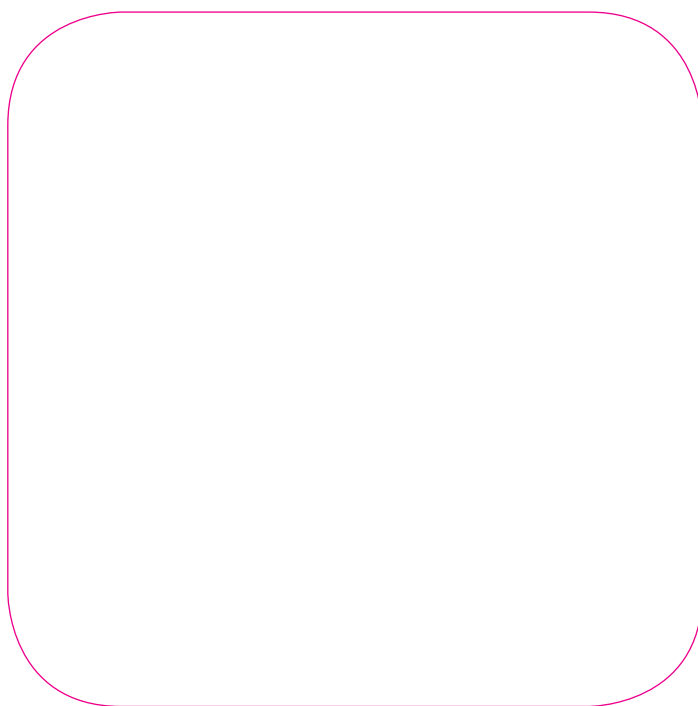

Korzyści ze stosowania hydroaktywnych opatrunków HydroTac:

- | | |
|---------------------------|--|
| Praktyczne: | <ul style="list-style-type: none">• Proste i higieniczne nałożenie opatrunku dzięki początkowej przylepności „Initial Tack”.• Opatrunek odpowiedni zarówno dla ran o dużym wysięku jak i suchych. |
| Skuteczne gojenie: | <ul style="list-style-type: none">• Wilgotne środowisko rany dzięki technologii AquaClear dla skutecznego gojenia rany.• Wysoki poziom ochrony skóry dzięki dobrej chłonności i zapobieganiu maceracji. |
| Wygoda: | <ul style="list-style-type: none">• Wysoki komfort noszenia dzięki miękkiej piance i cienkiej warstwie przylepnej folii poliuretanowej.• Bezbolesna zmiana opatrunku dzięki hydrożelowi zapobiegającemu przyklejaniu się opatrunku do rany. |
| Ekonomiczne: | <ul style="list-style-type: none">• Opatrunek pozostaje na ranie wystarczająco długo, aby zapewnić oszczędność czasu i pieniędzy.• Szeroki zakres zastosowań dla bezpiecznego stosowania i właściwego wyboru opatrunku. |


Nawilżający hydrożel

W przypadku ran suchych powierzchnia siatki hydrożelu uwalnia wilgoć do rany utrzymując w niej wilgotne środowisko.



Pianka zatrzymująca wysięk

Hydrofilowa pianka poliuretanowa wchłania nadmiar wysięku rany i bezpiecznie zamyka go w swojej strukturze.

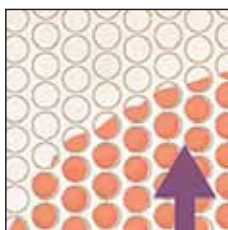

Bariera dla bakterii przepuszczająca parę wodną

Zewnętrzna folia poliuretanowa chroni ranę przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych. Dzięki zmiennej przepuszczalności pary wodnej zdolność wchłaniania wysięku jest dostosowywana do danego stanu rany.



PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
tel. 42 225 22 60
fax 42 225 23 00
www.hartmann.pl
sklep internetowy: www.hartmann24.pl
bezpłatna infolinia: 0 800 26 96 36 (8.00 – 16.00)



Nazwa produktu	Rozmiar	Zawartość opakowania	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
Bez krawędzi samoprzylepnej				
HydroTac®	10 x 10 cm	3 szt.	685 831	12
	10 x 10 cm	10 szt.	685 832	6
	10 x 20 cm	3 szt.	685 833	12
	15 x 15 cm	3 szt.	685 839	3
	20 x 20 cm	3 szt.	685 844	3
Z krawędzią samoprzylepną				
HydroTac® comfort	12,5 x 12,5 cm	3 szt.	685 814	12
	12,5 x 12,5 cm	10 szt.	685 815	6
	15 x 15 cm	3 szt.	685 817	12
	20 x 20 cm	3 szt.	685 822	12